



Magic Pro Benutzerhandbuch

Überlegener Analog-PEMF für eine
effektivere natürliche Therapie



Herzlichen Glückwunsch, Sie sind stolzer Besitzer eines MiraMate Magic Pro! Wenn Sie sich für MiraMate entscheiden haben, sind Sie bereits auf dem Weg zu gesünderen und glücklicheren Tagen.

Wenn Sie mit der Nutzung Ihres neuen Magic Pro beginnen, möchten wir sicherstellen, dass Sie das bestmögliche Erlebnis haben. Aus diesem Grund haben wir dieses Benutzerhandbuch erstellt, um Ihnen alle Tipps und Tricks zu geben. Sie es benötigen, um Ihr aufregendes neues Produkt optimal nutzen zu können.

Betrachten Sie dieses Handbuch als eine Schatzkarte, die Sie zu Edelsteinen führt. Dieses Handbuch ist Ihr Leitfaden, um das volle Potenzial des Magic Pro auszuschöpfen und deckt sowohl die Grundlagen als auch einige erweiterte Funktionen ab.

Und machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie Fragen oder Bedenken haben. Bitte kontaktieren Sie unser Kundenservice-Team über support@miramate.com oder LiveChat. Wir versprechen, Ihr zuverlässiger Kompass auf Ihrem Heilungsweg zu sein. Du bist niemals allein.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Arbeitsprinzipien	2
Packungsinhalt	4
Produktbilder	5
Betriebsanweisungen	5
Wartung	9
Vorsichtsmaßnahmen	11
Fehlerbehebung	13
Spezifikationen	15
Mehr PEMF-Optionen	17

Einführung

MiraMate Magic Pro ist ein leistungsstarkes Gerät, das Ihren gesamten Körper mit einem heilenden elektromagnetischen Feld umhüllt und so eine natürliche Linderung bei verschiedenen Beschwerden bietet. Und das Beste daran? Sie können es täglich mit absoluter Sicherheit und Zuversicht verwenden.

Magic Pro hat die Leistung von PEMF auf die nächste Stufe gehoben. Durch die Anwendung von Zweikanal-Analog-PEMF eröffnet sich eine Welt voller Möglichkeiten für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Diese innovative Technologie wandelt jedes Audiosignal in analoges PEMF um und ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingswellenformen, Musik, Gesänge und sogar Sutras in leistungsstarke Heilwerkzeuge zu verwandeln.

Es ist, als hätte man einen eigenen Zauberstab, der das Gewöhnliche in etwas Außergewöhnliches verwandeln kann. Diese Magie wird Ihnen helfen, das perfekte Gleichgewicht für Ihren Körper und Geist zu finden und das volle Potenzial für die natürliche Heilung Ihres Körpers freizusetzen.

Ganz gleich, ob Sie stechende Schmerzen lindern oder Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern möchten, MiraMate Magic Pro ist die perfekte Lösung.

Arbeitsprinzipien

PEMF (gepulstes elektromagnetisches Feld) ist eine hochmoderne Technologie, die auf die Grundbausteine Ihres Körpers – Ihre Zellen – abzielt, um Ihre allgemeine Gesundheit zu verbessern. Durch die Stimulierung des Zellstoffwechsels ist PEMF in der Lage, verschiedene Störungen, Krankheiten und Verletzungen zu lindern. Und im Gegensatz zu verschreibungspflichtigen Medikamenten oder medizinischen Eingriffen gibt es keine schädlichen Nebenwirkungen, über die man sich Sorgen machen müsste, was es zu einer sicheren und wirksamen Behandlungsoption für jedermann macht. Außerdem ist PEMF nicht nur für Menschen geeignet – auch unsere pelzigen Freunde können von seinen therapeutischen Eigenschaften profitieren.

Bei MiraMate haben wir die PEMF-Technologie mit unserem fortschrittlichen Zweikanal-Analog-PEMF auf die nächste Stufe gehoben. Diese innovative Technologie verleiht Magic Pro eine beispiellose Flexibilität und ermöglicht die Anwendung aller Wellenformen und Frequenzen. Mit Analog PEMF erleben Sie einen natürlicheren, zellfreundlicheren Heilungsansatz, der Ihren Körper in seiner eigenen Sprache anspricht. Magic Pro wandelt jede Klangquelle (einschließlich binauraler Beats) in heilendes analoges PEMF um und bietet so ein leistungsstarkes Werkzeug zur Genesung und Linderung.

Egal, ob Sie mit einer quälenden Verletzung zu kämpfen haben oder einfach nur Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern möchten, MiraMate Magic Pro ist genau das Richtige für Sie. Mit der einzigartigen Analog PEMF-Technologie können Sie schnellere Genesungszeiten und Linderung einer Vielzahl von Beschwerden erleben – und das alles ohne die schädlichen Nebenwirkungen herkömmlicher Behandlungen.

Packungsinhalt

Haupteinheit



PEMF-Mat



Spulentester



Netzteil



Audio Kabel



Benutzerhandbuch



Aufbewahrungstasche



Produktbilder



Betriebsanweisungen



Das Anschließen der Matte an das Hauptgerät

Stecken Sie das silberne Kopfende des mattweißen Kabels in den mittleren Anschluss des Hauptgeräts. Stellen Sie sicher, dass der rote Punkt auf dem Stecker nach oben zeigt und der

Stecker vollständig eingesteckt ist, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Stromversorgung anschließen

Stecken Sie das silberne Kopfende des schwarzen Netzkabels in den linken Anschluss des Hauptgeräts. Stellen Sie sicher, dass der rote Punkt auf dem Stecker nach oben zeigt und der Stecker vollständig eingesteckt ist. Stecken Sie dann das andere Ende in eine Netzsteckdose.

Senden von Audiosignalen an das Hauptgerät

Magic Pro wandelt jedes Audiosignal in magnetische Signale um. Es gibt zwei Möglichkeiten, Audio an Magic Pro zu senden:

- **Bluetooth**

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts (Telefon, PC usw.) ein, suchen Sie das Gerät mit dem Namen „MP1000“ und koppeln Sie es.

- **Kabel**

Stecken Sie ein Ende des Audiokabels in die Tonquelle (Telefon, Tablet, PC usw.). Stecken Sie das andere Ende in den rechten Anschluss (Magic Pro Audio). Stellen Sie sicher, dass der Stecker vollständig eingesteckt ist.


Einschalten

Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang. Das Licht am Hauptgerät geht an.

Testen

Das analoge PEMF bleibt stumm. Um die korrekte Funktion zu testen, öffnen Sie die Matte vollständig auf einer ebenen Fläche. Biegen Sie die Mattensegmente NICHT.

Nachdem Sie die Matte angeschlossen und das Hauptgerät eingeschaltet haben, können Sie Musik per Bluetooth oder Kabelverbindung an das Magic Pro senden. Wir empfehlen die Verwendung von Musik als Audioquelle, da reine Frequenzen möglicherweise außerhalb Ihres Hörbereichs liegen.

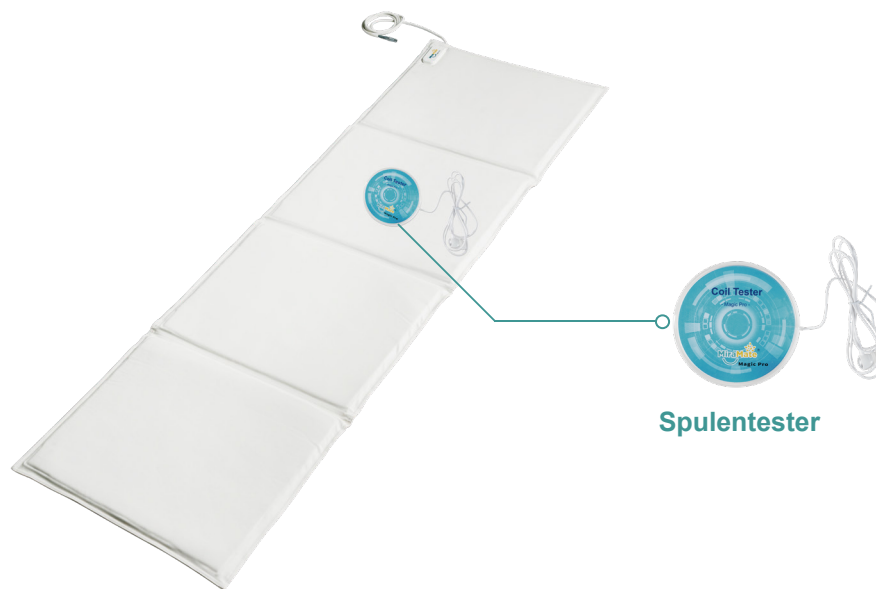

Das Licht am Hauptgerät sollte blinken oder seine Helligkeit sich ändern, während die Musik abgespielt wird.

Stecken Sie den Testspulen-Ohrstöpsel in Ihr Ohr und legen Sie den Spulentester auf die Matte. Sie sollten Musik aus dem Ohrstöpsel hören.

Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang. Das Licht am Hauptgerät erlischt.

Verwendung

Setzen oder liegen Sie einfach auf der Matte, um sich behandeln zu lassen. Die Matte kann einen sehr breiten und hohen Raum abdecken.

Mit dem Spulentester können Sie testen, wie weit das PEMF-Signal reichen kann. Das Abdecken der Matte mit einem Laken hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit des Magic Pro.

Die empfohlene Nutzungsdauer beträgt mindestens 30 Minuten pro Tag. Es gibt keine maximale Dauer. Die Frequenzen sind sanft und verursachen keine Überdosierungs- oder Müdigkeitserscheinungen.

Wartung

Reinigung

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie es reinigen.

Wischen Sie die Oberfläche zur täglichen Pflege vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einem weichen Tuch ab.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Matte besonders schmutzig wird. Sie können eine kleine Menge medizinischen Alkohols (mit einer Alkoholkonzentration von 75 % oder weniger) oder ein neutrales Reinigungsmittel verwenden, um die betroffenen Bereiche abzuwischen und zu desinfizieren. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihr Gerät sauber und hygienisch bleibt, so dass Sie es weiterhin mit vollem Vertrauen verwenden können.

Verwenden Sie KEINE ätzenden Reinigungsmittel.

Waschen, einweichen oder spülen Sie die Matte NICHT in Wasser.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in das Hauptgerät oder die Matte, um Kurzschlüsse und Stromschläge zu vermeiden.

Lagerung

Magic Pro sollte an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.

Bitte falten Sie die Matte entlang der Falten, um Schäden zu vermeiden.



Transport

Vermeiden Sie Stöße und Kontakt mit Flüssigkeiten beim Transport des Magic Pro.

Vorsichtsmaßnahmen

- Benutzen Sie die Matte NICHT im gefalteten Zustand. Dies kann die Mattenstruktur beschädigen und die Signalstärke verringern.
- Verwenden Sie Magic Pro NICHT im, am oder in der Nähe von Wasser.
- Verwenden Sie Magic Pro NICHT, wenn Sie schwanger sind oder nicht MRT-sichere Spiralen oder andere medizinische oder elektrische Geräte in Ihrem Körper haben.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie dieses Produkt NICHT ohne unsere schriftliche Zustimmung. Dies kann zu Fehlfunktionen oder elektrischen Gefahren führen.
- Stecken Sie die Kabel NICHT mit nassen Händen ein oder aus.
- Verwenden Sie Magic Pro NICHT an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z. B. einem Badezimmer.
- Verwenden Sie Magic Pro NICHT beim Baden.

Hinweis

Nichtmagnetische Metallstäbe, Schrauben und Platten sind für den PEMF-Einsatz sicher. Wenn Ihr Implantat für eine MRT geeignet ist, können Sie Magic Pro sicher verwenden.

Fehlerbehebung

Hauptstromleuchte leuchtet nicht:

Überprüfen Sie, ob die Hauptsteckdose mit Strom versorgt wird, indem Sie ein anderes Gerät verwenden.

Überprüfen Sie, ob alle Magic Pro-Stecker fest eingesteckt sind.

Drücken Sie den Netzschalter länger als zwei Sekunden.

Wenn Magic Pro immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Der Spulentester hat keinen Ton:

Wenn das Licht am Hauptgerät blinkt, liegt der Ton möglicherweise außerhalb Ihrer Hörreichweite. Wechseln Sie zu einem anderen Lied und versuchen Sie es erneut.

Möglicherweise ist die Lautstärke der Audioquelle zu niedrig. Erhöhen Sie die Lautstärke.

Wenn Sie Bluetooth verwenden, testen Sie Ihre Audioquelle mit Bluetooth-Kopfhörern oder -Lautsprechern.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Physische Schäden:

Ausgefranzte oder beschädigte Kabel oder Matten: Bitte senden Sie Fotos an den Kundendienst.

Spezifikationen

Maximale Spitzenleistung:	200 Watt
Anzahl der Ausgangsspulen:	96
Spulenaußendurchmesser:	103,58 mm
Spulennendurchmesser:	29,22 mm
Maximale Feldstärke/Spule:	1013,3 Gauss
Frequenzbereich:	20 Hz – 21050 Hz
Optimaler Behandlungsbereich:	<= 400 mm (15,5 Zoll).*
Wellenform:	Analog oder digital
Maximale Dauer:	Unbegrenzt
Konstruktion der Haupteinheit:	PC und ABS
Mattengröße:	200 cm (±2) × 63,5 (± 1,5) cm × 2,2 (±0,4) cm
Material der Mattenabdeckung:	Offenzellige PU-Membran mit geringer Hysterese
Rückfederungsmaterial:	10 mm Schwamm, doppellagig
Länge des Mattenkabels:	2m
Netzteil Eingang:	110–240 V, 50–60 Hz
Netzteil Ausgang:	24 V 10 A DC
Stromausgangsstecker:	2-poliger Luftfahrtsstecker
Maximale Ausgangsleistung des Hauptgeräts:	24 V × (0,25–3,3 A)
Größe der Haupteinheit:	185,5 mm × 135 mm × 111 mm
Audioeingang:	Bluetooth oder 3,5-mm-Audiobuchse

* Die Stärke magnetischer Felder nimmt mit zunehmender Entfernung langsam ab. Die Stärke magnetischer Felder ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung von der Quelle. Bei 800 mm (31 Zoll) beträgt die Feldstärke 25 % ($1/2^2$ oder $1/4$) der Stärke bei 400 mm.

Mehr PEMF-Optionen



MiraMate Mini Magic

MiraMate Mini Magic ist ein kompaktes und tragbares PEMF-Gerät, das akute Schmerzen und Beschwerden überall und jederzeit wirksam lindern kann.

Mini Magic ist ein ausgezeichneter Reisebegleiter, der Schmerzen lindert und den Schlaf während der Reise verbessert.

Mehr PEMF-Optionen



MiraMate Big Magic

Mit der großen PEMF-Matte kann Big Magic eine beträchtliche Fläche abdecken, so dass Sie sie auf Ihren Stuhl oder Ihr Bett legen und darauf sitzen oder liegen können. Diese Matte ist besonders nützlich für Personen, die Beschwerden im Rücken, in den Beinen oder in der Hüfte haben.

Sie können die ganze Nacht darauf schlafen und fühlen sich am nächsten Morgen erleichtert und erfrischt.

Magic Pro - Analoger PEMF für natürliche Heilung