



# Magic Pro

## Manuel de l'utilisateur

PEMF analogique supérieur pour  
une thérapie naturelle plus efficace



Nous vous félicitons d'être devenu l'heureux propriétaire d'un MiraMate Magic Pro ! En choisissant MiraMate, vous êtes déjà sur la voie d'une vie plus saine et plus heureuse.

Alors que vous commencez à utiliser votre nouveau Magic Pro, nous voulons nous assurer que vous ayez la meilleure expérience possible. C'est pourquoi nous avons créé ce manuel de l'utilisateur - pour vous fournir tous les conseils et astuces dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de votre nouveau produit.

Considérez ce manuel comme une carte au trésor qui vous mènera à des bijoux. Ce manuel est votre guide pour libérer tout le potentiel de votre Magic Pro, couvrant à la fois les bases et certaines fonctions plus avancées.

Et ne vous inquiétez pas si vous avez des questions ou des inquiétudes. N'hésitez pas à contacter notre service clientèle via [support@miramate.com](mailto:support@miramate.com) ou le LiveChat. Nous vous promettons d'être votre fidèle boussole sur votre chemin de guérison. Vous n'êtes jamais seul.

# Table des matières

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Introduction</b> .....                | <b>1</b>  |
| <b>Principes de fonctionnement</b> ..... | <b>2</b>  |
| <b>Contenu de l'emballage</b> .....      | <b>4</b>  |
| <b>Photos du produit</b> .....           | <b>5</b>  |
| <b>Instructions d'utilisation</b> .....  | <b>5</b>  |
| <b>Entretien et maintenance</b> .....    | <b>9</b>  |
| <b>Précautions d'emploi</b> .....        | <b>11</b> |
| <b>Résolution des problèmes</b> .....    | <b>13</b> |
| <b>Spécifications techniques</b> .....   | <b>15</b> |
| <b>Plus d'options PEMF</b> .....         | <b>17</b> |

## Introduction

---

MiraMate Magic Pro est un appareil puissant conçu pour envelopper tout votre corps d'un champ électromagnétique curatif, apportant un soulagement naturel à diverses affections. Et savez-vous le meilleur ? Vous pouvez l'utiliser quotidiennement en toute sécurité et en toute confiance.

Le Magic Pro a porté la puissance des champs magnétique PEMF à un niveau supérieur. En appliquant un double canal analogique magnétique, il ouvre un monde de possibilités pour votre santé et votre bien-être. Cette technologie innovante transforme n'importe quel signal audio en champ magnétique PEMF analogique, ce qui vous permet de transformer vos formes d'ondes, musiques, chants et même sutras préférés en puissants outils de guérison.

C'est comme si vous aviez votre propre baguette magique, capable de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Cette magie vous aidera à trouver l'équilibre parfait pour votre corps et votre esprit et à libérer tout le potentiel de guérison naturelle de votre corps.

Ainsi, que vous cherchiez à soulager une douleur persistante ou que vous souhaitiez améliorer votre bien-être général, le MiraMate Magic Pro est la solution idéale.

## Principes de fonctionnement

Le PEMF (Pulsed ElectroMagnetic Field ou champ électromagnétique pulsé), est une technologie de pointe qui cible les éléments constitutifs de votre corps - vos cellules - pour améliorer votre état de santé général. En stimulant le métabolisme cellulaire, le PEMF est capable de soulager divers troubles, maladies et blessures. Et contrairement aux médicaments sur ordonnance ou aux procédures médicales, il n'y a pas d'effets secondaires nocifs à craindre, ce qui en fait une option de traitement sûre et efficace pour tout le monde. De plus, le PEMF n'est pas réservé aux humains - même nos amis à quatre pattes peuvent bénéficier de ses propriétés thérapeutiques.

Chez MiraMate, nous avons porté la technologie PEMF à un niveau supérieur grâce à notre PEMF analogique à double canal. Cette technologie innovante confère au Magic Pro une flexibilité inégalée, permettant l'application de toutes les formes d'ondes et de toutes les fréquences. Avec le PEMF analogique, vous ferez l'expérience d'une approche de la guérison cellulaire plus naturelle et plus respectueuse, qui s'adresse à votre corps dans sa propre langue. Le Magic Pro convertit n'importe quelle source sonore (y compris les battements binauraux) en PEMF analogique curatif, ce qui constitue un outil puissant de récupération et de soulagement.

Ainsi, que vous fassiez face à une blessure tenace ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre bien-être général, MiraMate Magic Pro vous couvre. Grâce à sa technologie PEMF analogique unique, vous pouvez bénéficier d'un temps de récupération plus rapide et d'un soulagement de toute une série de conditions, le tout sans les effets secondaires nocifs des traitements traditionnels.

## Contenu de l'emballage

Unité principale .....



Tapis PEMF .....



Testeur de bobines .....



Adaptateur d'alimentation .....



Câble audio .....



Manuel de l'utilisateur .....



Sac de rangement .....



## Photos du produit



## Instructions d'utilisation



### Connexion du tapis à l'unité principale

Branchez l'extrémité argentée du câble blanc du tapis dans le port central de l'unité principale. Assurez-vous que le point rouge de la fiche est orienté vers le haut et que la fiche est

complètement insérée pour garantir une connexion sûre.

### **Branchement de l'alimentation**

Branchez l'extrémité argentée du câble d'alimentation noir dans le port gauche de l'unité principale. Assurez-vous que le point rouge de la fiche est orienté vers le haut et que la fiche est complètement insérée. Branchez ensuite l'autre extrémité dans une prise de courant.

### **Envoi de l'audio à l'unité principale**

Le Magic Pro convertit n'importe quel signal audio en signaux magnétiques. Il existe deux options pour envoyer de l'audio au Magic Pro :

- **Bluetooth**  
Activez la fonction Bluetooth de votre appareil (téléphone, PC, etc.), recherchez l'appareil appelé "MP1000" et associez-le.
- **Câble**  
Branchez une extrémité du câble audio dans la source sonore (téléphone, tablette, PC, etc.). Branchez l'autre extrémité dans le port de droite (Magic Pro audio). Veillez à ce que la fiche soit complètement insérée.


### **Mise en marche**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. Le voyant de l'unité principale s'allume.

### **Test**

Le PEMF analogique est silencieux. Pour tester le bon fonctionnement, ouvrez complètement le tapis sur une surface plane. Ne pas plier les segments du tapis.

Après avoir connecté le tapis et allumé l'unité principale, envoyez la musique à Magic Pro à l'aide de Bluetooth ou d'une connexion par câble. Nous recommandons d'utiliser la musique comme source audio car les fréquences pures peuvent être hors de votre portée auditive.

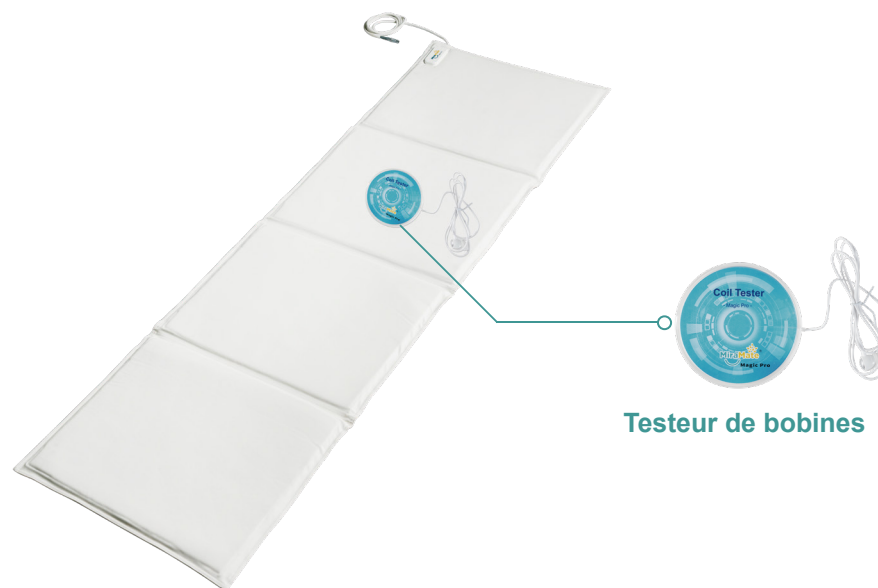

Le voyant de l'unité principale doit clignoter ou changer de luminosité lorsque la musique est jouée.

Mettez le bouchon d'oreille de la bobine de test dans votre oreille et placez le testeur de bobine sur le tapis. Vous devriez écouter de la musique dans le bouchon d'oreille.

### **Mise hors tension**

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. La lumière de l'unité principale s'éteint.

### **Utilisation**

Il suffit de s'asseoir ou de s'allonger sur le tapis pour recevoir un traitement. La natte peut couvrir un espace très large et très haut.

Vous pouvez utiliser le testeur de bobine pour tester la portée du signal PEMF.

Couvrir le tapis avec un drap n'affectera pas l'efficacité du Magic Pro.

La durée d'utilisation recommandée est d'au moins 30 minutes par jour. Il n'y a pas de durée maximale. Les fréquences sont douces et ne provoquent pas de symptômes de surdose ou de fatigue.

## **Entretien et maintenance**

---

### **Nettoyage**

Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant avant de le nettoyer.

Pour l'entretien quotidien, utilisez un mouchoir humide ou un chiffon doux pour essuyer délicatement la surface.

Si votre tapis est particulièrement sale, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser une petite quantité d'alcool médical (avec une concentration d'alcool de 75 % ou moins) ou un nettoyant neutre pour essuyer et désinfecter les zones concernées. Cela vous permettra de vous assurer que votre appareil reste propre et hygiénique, afin que vous puissiez continuer à l'utiliser en toute confiance.

N'utilisez PAS de nettoyant corrosif.

Ne PAS laver, tremper ou rincer le tapis dans l'eau.

Empêchez l'eau ou tout autre liquide de pénétrer dans l'unité principale ou dans le tapis afin d'éviter les courts-circuits et les chocs électriques.

## Stockage

Le Magic Pro doit être stocké dans un endroit frais, ventilé et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Veuillez plier le tapis en suivant les plis pour éviter de l'endommager.



## Transport

Évitez les chocs et le contact avec les liquides lors du transport du Magic Pro.

## Précautions d'emploi

---

- N'utilisez PAS le tapis plié. Cela pourrait endommager la structure du tapis et réduire la force du signal.
- N'utilisez PAS le Magic Pro dans, près ou autour de l'eau.
- N'utilisez PAS le Magic Pro si vous êtes enceinte ou si vous portez un stérilet ou un autre dispositif médical ou électrique non compatible avec les IRM.
- Ne PAS démonter, réparer ou modifier ce produit sans notre accord écrit. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou un risque électrique.
- Ne PAS brancher ou débrancher les câbles avec des mains mouillées.
- N'utilisez PAS le Magic Pro dans un endroit très humide, comme une salle de bain.
- N'utilisez PAS le Magic Pro lorsque vous vous baignez.

### Remarque

Les tiges, vis et plaques métalliques non magnétiques peuvent être utilisées sans danger pour le PEMF. Si votre implant est compatible avec les IRM, vous pouvez utiliser Magic Pro en toute sécurité.

## Résolution des problèmes

---

### **Le voyant d'alimentation principale ne s'allume pas :**

Vérifiez que la prise principale est alimentée en utilisant un autre appareil.

Vérifiez que toutes les fiches de Magic Pro sont bien branchées.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant plus de deux secondes.

Si le Magic Pro ne fonctionne toujours pas, contactez le service clientèle.

### **Le testeur de bobines n'émet aucun son :**

Si le voyant de l'unité principale clignote, il se peut que le son soit hors de votre portée auditive. Passez à une autre chanson et réessayez.

Le volume de la source audio est peut-être trop faible. Augmentez le volume.

Si vous utilisez Bluetooth, testez votre source audio à l'aide d'un casque ou d'un haut-parleur Bluetooth.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle.

## Dommages physiques :

Câbles ou tapis effilochés ou endommagés : Merci d'envoyer des photos au service clientèle.

## Spécifications techniques

|  |  |
|--|--|
| Puissance de crête maximale:                         | 200 watts  |
| Nombre de bobines de sortie:                         | 96   |
| Diamètre extérieur de la bobine:                     | 103,58 mm  |
| Diamètre intérieur de la bobine:                     | 29,22 mm   |
| Intensité de champ maximale / bobine:                | 1013.3 Gauss   |
| Gamme de fréquences:                                 | 20 Hz - 21050 Hz   |
| Distance de traitement optimale:                     | <= 400mm (15.5 pouces).*   |
| Forme d'onde:  | Analogique ou numérique  |
| Durée maximale:                                      | Illimitée  |
| Construction de l'unité principale:                  | PC & ABS   |
| Taille du tapis:                                     | 200cm(±2)×63.5(±1.5)cm×2.2(±0.4)cm   |
| Matériau de la housse du tapis:                      | matériau en polyuréthane (PU) présentant un faible niveau d'hystérésis et une structure à cellules ouvertes. |
| Matériau des ressorts:                               | éponge de 10 mm, double couche   |
| Longueur du câble du tapis:                          | 2m   |
| Entrée de l'adaptateur d'alimentation:               | 110-240v 50-60 Hz  |
| Sortie de l'adaptateur électrique:                   | 24v 10A DC   |
| Prise de sortie d'alimentation:                      | connecteur aviation à 2 broches  |
| Puissance maximale de sortie de l'unité principale : | 24 V × (0,25-3,3 A)  |
| Taille de l'unité principale:                        | 185,5 mm × 135 mm × 111 mm   |
| Entrée audio:  | Bluetooth ou prise audio 3,5 mm  |

\* L'intensité des champs magnétiques diminue lentement avec la distance. L'intensité des champs magnétiques est inversement proportionnelle au carré de la distance par rapport à la source. À 800mm (31 pouces), l'intensité du champ est de 25 % ( $1/2^2$  ou  $1/4$ ) de l'intensité à 400mm.

## Plus d'options PEMF

---



**MiraMate Mini Magic**

MiraMate Mini Magic est un appareil PEMF compact et portable qui peut réduire efficacement la douleur aiguë et l'inconfort n'importe où et n'importe quand.

Mini Magic est un excellent compagnon de voyage qui aide à soulager la douleur et à améliorer le sommeil pendant le voyage.

## Plus d'options PEMF

---



**MiraMate Big Magic**

Avec le grand tapis PEMF, Big Magic peut couvrir une surface considérable, ce qui vous permet de le placer sur votre chaise ou votre lit et de vous y asseoir ou de vous y allonger. Ce tapis est particulièrement utile pour les personnes qui souffrent d'inconfort au niveau du dos, des jambes ou des hanches.

Vous pouvez dormir en toute sécurité sur ce tapis toute la nuit et vous sentir soulagé et rafraîchi le matin.

**MiraMate Magic Pro – Champ magnétique analogique PEMF pour une guérison naturelle**